

Alzawater fisso Mobilex

Manuale d'uso e manutenzione



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

www.mobilex-care.com

Importante!

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente questo manuale. Leggete e seguite scrupolosamente tutte le istruzioni e seguite particolarmente gli avvisi per la sicurezza!

Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vs. rivenditore o direttamente alla Mobilex A/S:

Mobilex A/S

Noerskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

Telefono: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Avvisi generali

Marchio CE

Questo prodotto è costruito a norma della direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di produzione. La garanzia decade se il prodotto non è usato correttamente o in modo improprio. Il normale logoramento è escluso da garanzia, eccetto per difetti di produzione. La garanzia non comprende il trasporto.

2. Avvisi di sicurezza

- usare l'alzawater solo se è in perfette condizioni tecniche.
- nel caso si riscontrasse un qualsiasi difetto o danneggiamento del prodotto, contattare immediatamente il rivenditore.
- controllate quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Non caricate l'alzawater con pesi superiori alla portata massima!
- controllate che i due perni passanti siano regolati sulla stessa altezza.
- fissare l'alzawater alla tazza del water.
- usare l'alzawater solo per l'uso previsto e consentito.
- appoggiarsi uniformemente con le mani su tutt'e due i braccioli.
- non montare o salire con i piedi sull'alzawater.
- usare ed immagazzinare l'alzawater solo in ambienti chiusi (non all'aperto).

3. Descrizione e dati tecnici

L'alzawater è regolabile per 3 differenti altezze ed è adattabile a tutti i water standard. Si fissa a mezzo di perni filettati passanti nei fori per il coperchio presenti sul water. I braccioli sono reclinabili e staccabili senza uso d'attrezzi. Per una pulizia e/o disinfezione l'alzawater può essere facilmente rimosso, togliendo le viti di fissaggio dai passanti filettati.

Dati tecnici

larghezza totale:	43 cm
profondità totale:	49,5 cm
larghezza tra i braccioli:	49 cm
altezza regolabile:	9 cm, 13 cm, 17 cm
peso totale:	6,2 kg
portata massima:	120 kg
misure d'imballo:	larghezza 59 cm, profondità 52 cm, altezza 26 cm

Etichetta identificativa del prodotto

L'etichetta si trova sulla parte posteriore dell'alzawater



4. Montaggio

- togliete il coperchio standard dal water
- aggiustate i due passanti filettati alla larghezza dei fori del water
- fissate l'alzawater al water stringendo le due viti in plastica
- inserite i braccioli nei appositi fori a destra e sinistra dell'alzawater tenendo premuto i due fermi di bloccaggio. Spingere a fondo i braccioli finchè si sente l'aggancio interno dei due fermi

Regolazione dell'altezza

- togliete i tappi in plastica e svitate le viti del perno d'appoggio anteriore. Regolate il perno sulla posizione desiderata, fissandolo nuovamente con le viti
- allentate le viti di fissaggio che fissano posteriormente l'alzawater al water
- svitate le viti del perno d'appoggio posteriore e regolatelo sulla stessa altezza di quello anteriore. Fissatelo con le sue viti.
- stringete le viti di fissaggio che fissano posteriormente l'alzawater al water
- coprite le viti dei perni d'appoggio con i tappi in plastica in dotazione


5. Manutenzione

Pulire il telaio e le parti in plastica con detergenti neutri e con panni morbidi e non abrasivi. Usate esclusivamente detergenti indicati alla pulizia e/o disinfezione (non usate solventi o abrasivi). Controllate le indicazioni del detergente. È consigliato far controllare il prodotto in intervalli regolari da un tecnico specializzato, prestando particolare attenzione alle viti e parti fissaggio.

6. Smaltimento

L'alzawater Mobilex non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle „oasi ecologiche“

7. Illustrazione

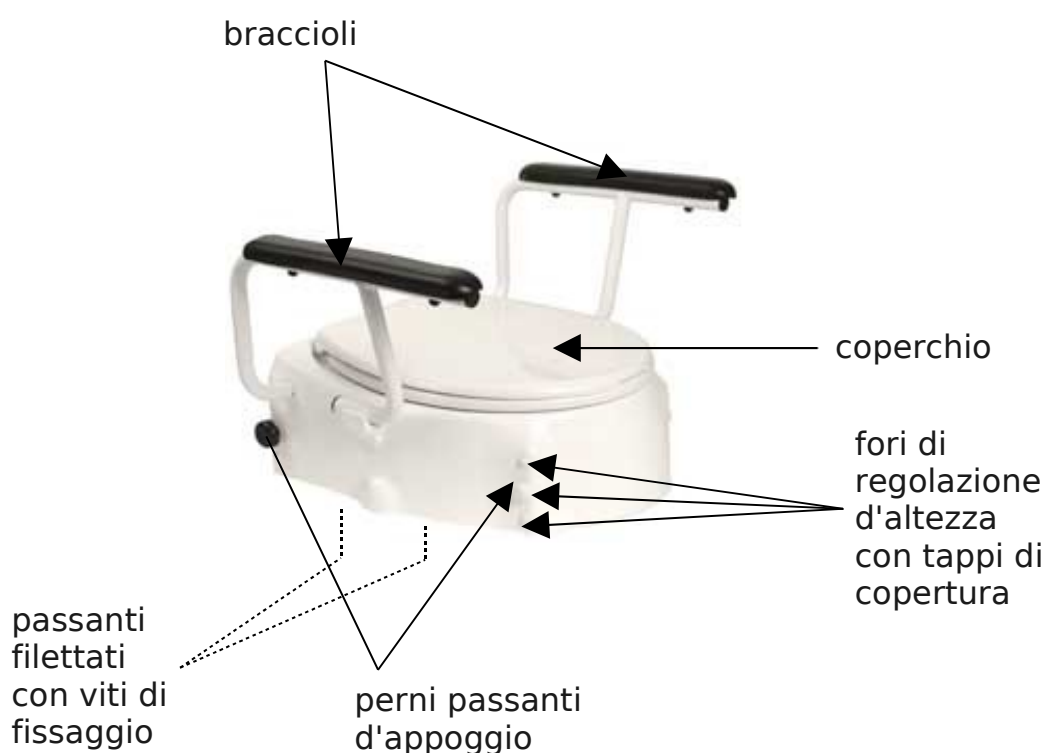

8. Dichiarazione di conformità

la ditta

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

dichiara con la presente che l'**alzawater Mobilex 301701** è costruito in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE:

- **direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici**

il responsabile:

nome: Lars Nygaard
posizione: amministratore delegato
ditta: Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Danimarca

Skanderborg, li 01/02/2006

.....
data



.....
firma