

**Svingbart badesæde  
302022  
Montage- og brugervejledning**



**MOBILEX A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark  
[www.mobilex-care.com](http://www.mobilex-care.com)

## 1. Indledning

Kære kunde,

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

### Formålsbeskrivelse

Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre eller handicappede personer, der har brug for støtte i forbindelse med at komme i hhv. forlade badekarret samt i forbindelse med badet. Produktet giver brugeren mulighed for at komme i bad med eller uden assistance fra en hjælper. Anden anvendelse end beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tilladt.

Ved spørgsmål bedes De henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

### Mobilex A/S

Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Denmark

Telefon: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: info@mobilex-care.com

## 2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren, og produktet må ikke længere anvendes.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet, herunder max. Belastning.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktive ændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- I forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m er der risiko for at klemme fingrene.
- Produktet må kun anvendes i traditionelle badekar med lige høje kanter. Sørg for at bredden er korrekt justeret før produktet tages i brug, og at de 4 arme ligger fladt og stabilt.
- Det anbefales at en hjælper assisterer ved anvendelse af produktet.
- Badesædet må ikke anvendes til at stå på.

## 3. Beskrivelse

### Produktbeskrivelse


Badesædet består af en ramme lavet af aluminium med et blødt PUR-sæde og samt ryglæn. De 4 arme er forsynet med beskyttende gummi dupsko, der skal placeres på badekarrets sider.

### Montageanvisning

- Sæt rygrørene fast på undersiden af rammen med clips'ene.
- Monter PUR-ryggen på rygrørene.
- Skub armlænsrørene ind i de 2 huller på hver side af rammen, ved at trykke fjederen der sidder på det ene rør ind.
- Placer badesædet på badekarret. Check at alle 4 arme ligger fladt og stabilt på badekarrets sider. Juster de 2 støttearme der sidder under sædet, så de netop når badekarsiden.
- Sædets position i forhold til siderne kan reguleres i 3 positioner. Dette gøres ved at vende badesædet om på siden og dreje på plastgrebet indtil det frigøres. Derefter kan der vælges en anden position, og plastgrebet kan iskrues igen.
- Kontroller at sæden kan bevæges fra side til side, når låsearmen løftes.

### Funktionsbeskrivelse

- Drej sædet mod badekarrets side ved at løfte låsearmen og dreje sædet.
- Drej dig selv så du vender med ryggen til sædet, placer dine hænder på badekarsædet og løft dig op på badesædet.
- Træk op i låsearmen og drej sædet tilbage til udgangssituationen. Slip låsearmen og kontroller, at låsen går i indgreb så sædet ikke kan drejes.
- For at komme fra badekarret gøres det samme i modsat rækkefølge.

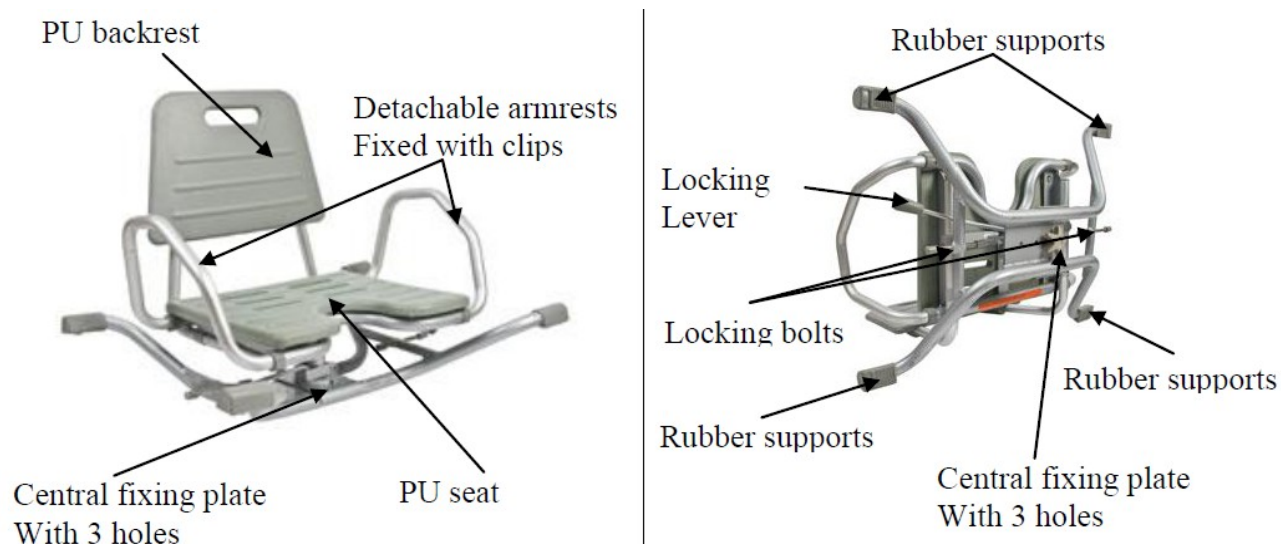

### Transportbeskrivelse

Badesædet kan enkelt medbringes og anvendes andre steder.

### Tilbehør


Der er ikke tilbehør til badesædet.

## 4. Tekniske data

Svingbart badesæde	302022
Total bredde	71 cm
Total dybde	54 cm
Total højde	57 cm
Sædebredde	41 cm
Sædedybde	34 cm
Armlæenshøjde	38 cm
Vægt	4,88 kg
Max belastning	130 kg
Indvendig badekarbredde	57-66 cm

### Produkt label

Typeskiltet befinder sig på bagsiden af rammen.

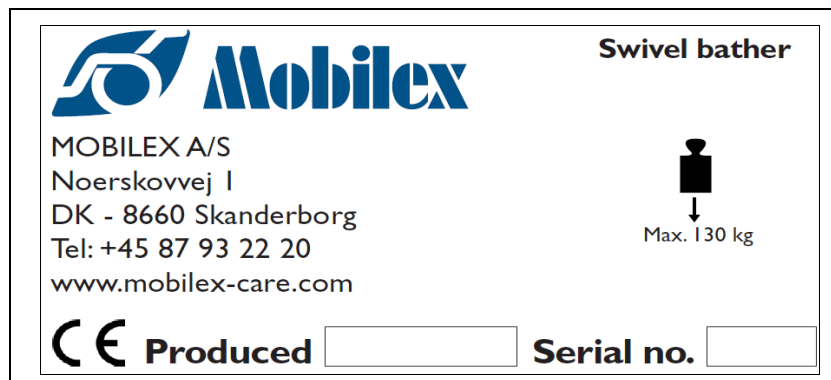

Billede af typeskiltet

## 5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøring.

Badekarsædet er normal vedligeholdelsesfrit, men det anbefales at kontrollere om gummidupskoene sidder korrekt og ikke er ved at falde af. Kontroller også at sædet sidder korrekt på.

Produktet udsættes for slid ved brug, og det anbefales regelmæssigt at få udført en kontrol af en fagmand.

## 6. Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
PUR-sædet sidder ikke fast.	En eller flere af propperne der holder sædet på plads er ikke korrekt monterede.	Tag badekarsædet op af badekarret og vend det på hovedet. Kontroller om propperne sidder korrekt i hullerne. Hvis ikke vendes badekarsædet igen om, og der presses på PUR-sædet der hvor propperne sidder, indtil de går i indgreb.
Badekarsædet ligger ikke flat og stabilt på badekarrets sider, men kan rokke frem og tilbage.	Gummi dupskoene er ikke parallelle eller ligger ikke flat.	Kontroller om alle armene er justerede korrekt og om alle 4 gummi dupsko vender rigtigt og sidder rigtigt på armene. Juster længden af armene og vend gummidupskoene rigtigt.
Badesædet kan ikke rotere korrekt.	Armlænene går på badekarrets sider.	Flyt badesædet til en af de andre positioner på fixeringspladen.

## 7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

## 8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktive ændringer på produktet uden vores skriftlige accept bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte.

Garantien omfatter ikke erstatning for manglende benyttelse under reparation, og der ydes ikke erstatning for skader der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

## 9. Konformitetserklæring

Mobilex A/S, Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

### **Drejbart badesæde 302022**

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinalprodukter  
Del I fra 14 Juni 1993**

Lars Nygaard  
Adm. Direktør  
Mobilex A/S

Skanderborg, den 01.02.2010



.....  
Underskrift