

PU-Reifen Montagegerät 211501

Montage- und Bedienungsanleitung



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex.dk

Wichtig!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit .

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

1. Allgemeine Hinweise

Garantie

Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. Kein Anspruch besteht bei unsachgemäßem Gebrauch. Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst keine Transportkosten.

2. Sicherheitshinweise


- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler
- Bitte nutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Einsatzbereich

3. Beschreibung und Lieferumfang

Produkt Beschreibung / Einsatzbereich

Das Mobilex Montagegerät 211501 wurde als Montagehilfe für die Montage von Polyurethan "Vollgummi" Reifen mit einer Größe von 20" bis 28" entwickelt. Es erleichtert und beschleunigt die Montage von PU Reifen beträchtlich und kann damit zu einem nicht unerheblichen Zeitgewinn bei der Reifenmontage beitragen.

Lieferumfang

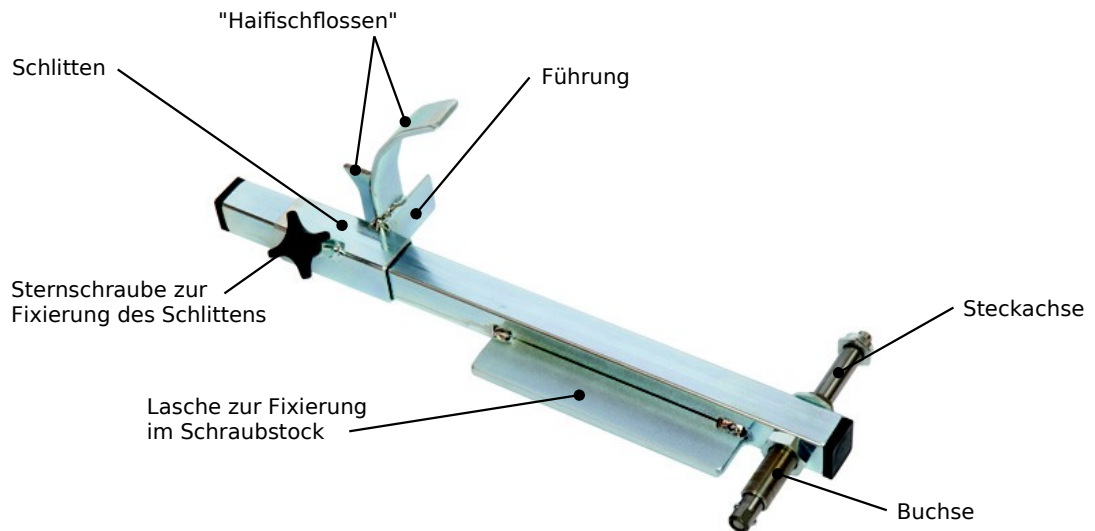


Zusammenbau

Das Reifenmontiergerät MBX 211501 wird bereits zusammengesetzt geliefert

Bedienung



1. Fixieren Sie das Montiergerät im Schraubstock und montieren Sie das Rad mit der Steckachse an der Buchse am Montiergerät.

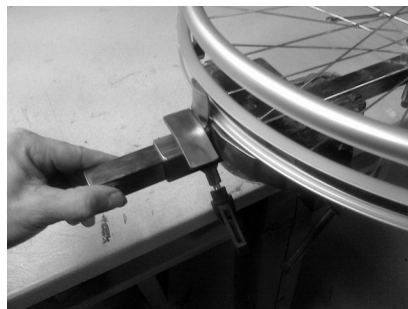

2. Verschieben Sie die Schiene am Montiergerät so dass die senkrechte "Haifischflosse" leicht an der Felge anliegt und blockieren Sie die Schiene mit der Sternschraube.



3. Setzen Sie den PU-Reifen auf die Felge und drücken Sie den Reifen so weit wie möglich in die Felge. Achten Sie darauf dass die senkrechte Flosse sich zwischen Reifen und Felge befindet.



4. Drehen Sie das Rad mit der Hand einmal rundum bis zum Punkt von dem Sie gestartet sind. Der Reifen sollte nun montiert sein.



5. Entfernen Sie nun das Rad vom Montiergerät indem Sie es nach oben abziehen und von der Flosse lösen. Dies kann etwas schwergängig sein.

4. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung geeignet sind.

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen auf seine korrekte Funktionsfähigkeit zu überprüfen.

5. Entsorgung des Produktes

Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

6. Garantie

Mobilex A/S bietet 2 Jahre Garantie auf Schäden die durch Produktionsfehler oder Materialfehler verursacht sind. Die Garantie erlischt bei nicht bestimmungsgemäßer Reparatur, Wartung oder Verwendung des Produkts. Teile mit normalem Verschleiß unterliegen nicht der Gewährleistung. Bei Produktänderungen ohne unsere schriftliche Zustimmung erlischt die CE-Kennzeichnung und unsere Produkthaftung. Im Falle von Produktschäden, die durch diese Garantie abgedeckt sind, benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler oder Mobilex A/S direkt. Die Garantie deckt keine Transportkosten und keinen Schadenersatz während der Reparatur und keinen Personenschaden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verletzungen oder andere Schäden, die auf Nicht-Einhaltung von der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind.

*Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
info@mobilex.dk*