


Mobilex Dolphin letvægtskørestol har en sølvfarvet aluminiumsramme. Sædedybden kan justeres fra 42-48 cm. Drivhjulene i 24" er monteret med quick-release aksler. Der er en montageplade med ekstra hul for ben-amputerede samt klapbare armlæn som kan justeres i højden uden brug af værktøj, ligesom kørehåndtagene er højderegulerbare. Standard leveres stolen med faste, højderegulerbare benstøtter, og vinkelstilbare benstøtter kan leveres som tilbehør. Stolen fås i forskellige siddebredder. En standard kørestolspude medfølger som standard .


DOLPHIN	Varenr. 271340	Varenr. 271344	Varenr. 271348	Varenr. 271351
Siddebredde	40 cm	44 cm	48 cm	51 cm
Siddedybde indstillelig	42 cm, 44 cm, 46 cm, 48 cm			
Siddehøjde min./max.	45 - 52,5 cm i trin af 1,5 cm			
Totalbredde	60,30 cm	64,30 cm	68,30 cm	71,30 cm
Vægt	15,60 kg	15,90 kg	16,20 kg	16,75 kg
Max. brugervægt	120 kg	120 kg	120 kg	150 kg




H1a. Kørestolen fås i bredderne 40, 44, 48, 51 cm
Siddedybden er justerbar fra 42 til 48 cm

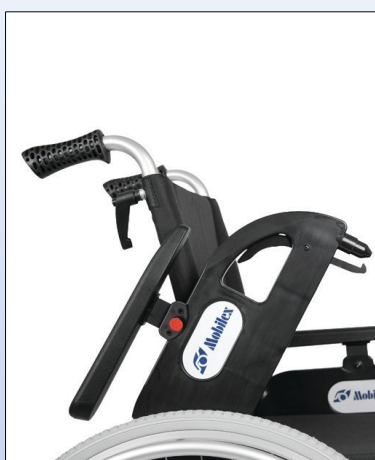

H1b. Højdejusterbart og klapbart armlæn

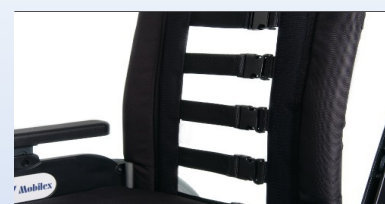


H1c. Justerbar Velcro-ryg

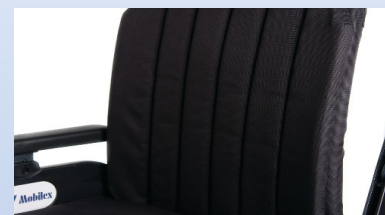

H1g. Flip-ryg



H1d. Kørestolen kan også leveres med tromlebremser

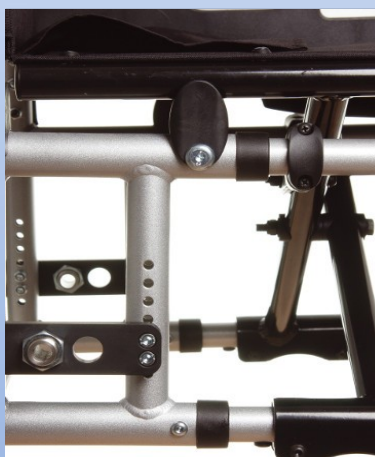

H1e. Siddedybde justerbar og højdeindstillelig



H1f. Vinkelstilbar benstøtte