


Standard kørestolspude

Fremstillet i kvalitets koldskum med høj bæreevne. Pudens bund er lavet af et unikt skridsikker materiale, så den kan anvendes på alle stole uafhængigt af velcroens placering. Pudene er afrundet foran for at mindske trykket mod undersiden af låret. Pudene er udstyret med en lynlås på bagsiden, og 10 cm ned af begge sider, så man kan tage betrækket af for vask.

Betrækket er syet af Polyester, der sikrer stor slidstyrke, samt god strækkevne.

Pudene er 5 cm i højde og 43 cm dybe. Leveres i 6 størrelser fra 37,5cm til 50 cm

Kørestolpude af koldskum eller viskoelastisk skum med sort polyester eller inkontinens betræk

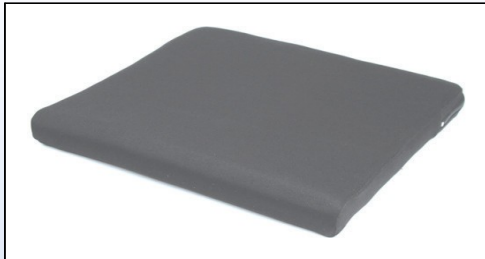

P1. Standard kørestolspude



P2a. Kørestolspude med inkontinensbetræk



P2b. Skridsikker belægning

Pudene fås også med inkontinensbetræk i samme dimensioner og kan også leveres i specialmål efter aftale. Note: Ved større mængder, og mod en beskednen merpris kan pudene leveres med tryk efter aftale.

Justerbar universal kørestolpude



P3a. Universal pude med Inkontinensbetræk



P3b. Siddepude med åbent betræk og pre-cut skum til dybdeindstilling

Universal i siddedybden justerbar kørestolspude af koldskum med sort inkontinensbetræk. Betrækket er udstyret med velcro og kan let åbnes. Pudene er lavet af koldskum, og er allerede udstyret med riller for dybdejustering af pudene til kørestolesædet. Skummet skæres til den ønskede dybde. Pudene leveres som standard med vores kørestol "Dolphin".

Pudene leveres for siddebredde fra 40 til 51 cm. Siddedybden kan reduceres fra 48 cm til 42 cm.

Siddepude med dobbelt skum (Viskoelastisk Skum og koldskum)



P4a. Pude med inkontinens betræk



P4b. Underside med skridsikker belægning



P4c. Viskoelastisk + PU skum

Kørestolspuden er opbygget med et lag viskoelastisk skum øverst og en almindelig koldskum nederst. Leveres komplet med inkontinens betræk, og skridsikker underside. Kan leveres i 5 størrelser fra 40 - 50 cm.

**P5.** Kørestolspude med ventil for regulering af luftindhold

Mobilex Luftpude

Mobilex Luftpuden er udstyret med en speciel ventil, der tillader indstilling af ønsket lufttryk. Brugeren sætter sig på puden og udløser ventilen, hvorefter puden indstiller sig efter brugeren. Når ventilen lukkes fastholder puden formen, og man opnår derved optimal trykfordeling

Leveres i 3 størrelse (D x T x H):

- 40 x 40 x 8 cm
- 45 x 45 x 8 cm
- 50 x 48 x 8 cm

**P6.** Drejesæde mørkeblå med skridsikker underside Ø 45 cm eller Ø 50 cm.

Mobilex drejesædet

Mobilex drejesædet består af 2 slags for skellige tekstiler, der er forbundet i midten. Indersiden er glat, og derved gøres det lettere at dreje. Undersiden er belagt med skridsikker belægning. Sædet kan anvendes i en bil, eller i øvrigt hvor drejbarhed er ønsket.

Diameter: 45 eller 50 cm
Max. Belastning: 100 kg.

**P7.** Skråpude med gråt Decutex betræk

Mobilex skråpude

Skråpuden består af 2 lag skum. Nederst en stabil granulatskum, og øverst en viskoelastisk skum. Det grå Decutex inkontinensbetræk er både stærkt og rengøringsvenligt.

Mål: (B x T x H): 45 x 43 x 10/0 cm

**P8.** Skråpude i granulatskum

Standard skråpude

Fremstillet i granulat skum. Vaskbart betræk med skridsikker underside kan leveres som tilbehør.

Leveres i 2 størrelser (B x D x H):

- 45 X 45 X 8/1 cm
- 45 X 45 X 10/1 cm