


Standard kørestolspude fremstillet af kvalitets koldskum med høj bæreevne. Pudens bund er lavet af et unikt skridsikkert materiale, så den kan anvendes på alle typer stole, uafhængigt af velcro placering.

Puden er afrundet foran for at mindske trykket mod undersiden af låret.

Betrækket er syet af Polyester, der sikrer stor slidstyrke, samt god strækkevne.

Puden er udstyret med en lynlås på bagsiden og 10 cm ned af begge sider, så man kan tage betrækket af for vask.

Puderne er 5 cm høje og 43 cm dybe og fås i 6 bredder fra 37,5 cm til 50 cm.

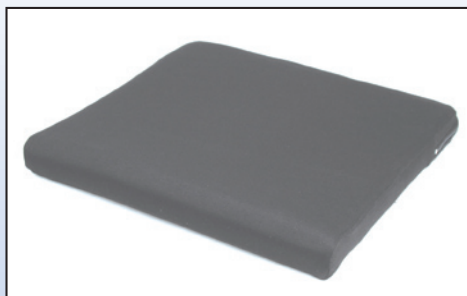

P1. Puden set forfra



P2. Skridsikker belægning



P3. Inkontinensbetræk

Puderne fås også med elastisk inkontinensbetræk i samme dimensioner. Mod en beskedne merpris kan puderne leveres med hvidt tryk med navn eller logo.

P4. Siddepude med viskoelastisk skum



P4a. Inkontinensbetræk



P4b. Underside med skridsikker belægning



P4c. Viscoelastisk skum

Siddepude der er opbygget af et lag skum og et lag viskoelastisk skum. Komplet med inkontinensbetræk.

I 5 størrelser (B x D x H):

40,0 X 40 X 8 cm
42,5 X 43 X 8 cm
45,0 X 45 X 8 cm
47,5 X 45 X 9 cm
50,0 X 48 X 9 cm

**P5.** Drejeskive**P6.** Kørestolspude med ventil for regulering af luftindhold.

Mobilex luft-puden er udstyret med en speciel ventil, der tillader indstilling af ønsket lufttryk. Brugeren sætter sig på puden og udløser ventilen, hvorefter puden "indstiller" sig efter brugeren. Når ventilen lukkes fastholder ventilen formen og man opnår derved en optimal trykfordeling.