


TIGER

OUTDOOR ROLLATOR



Mobilex
a better life in motion

Rollator Tiger * med indstillelige underarmstøtter	Standard	Outdoor
	Varenr. 312201 (grå) Varenr. 312211 (rød) Varenr. 312202 (brun) *	Varenr. 312205 (grå) * Varenr. 312206 (brun) *
Højde af underarmstøtterne (justérbar)	90 cm - 115 cm	87 - 110 cm
Anbefalede brugerhøjde	150 - 200 cm	140 - 185 cm
Sædehøjde	62 cm	62 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	62 cm / 22,5 cm	71 cm / 31 cm
Siddebredde /Indv. bredde mellem skubbehåndtag	46 cm / 36 cm	56 cm / 46 cm
Længde (dybde)	66 cm	77 cm
Vægt (+ taske 380 g)	9,5 kg	12 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul	200 x 35 mm	285/235 x 44 mm

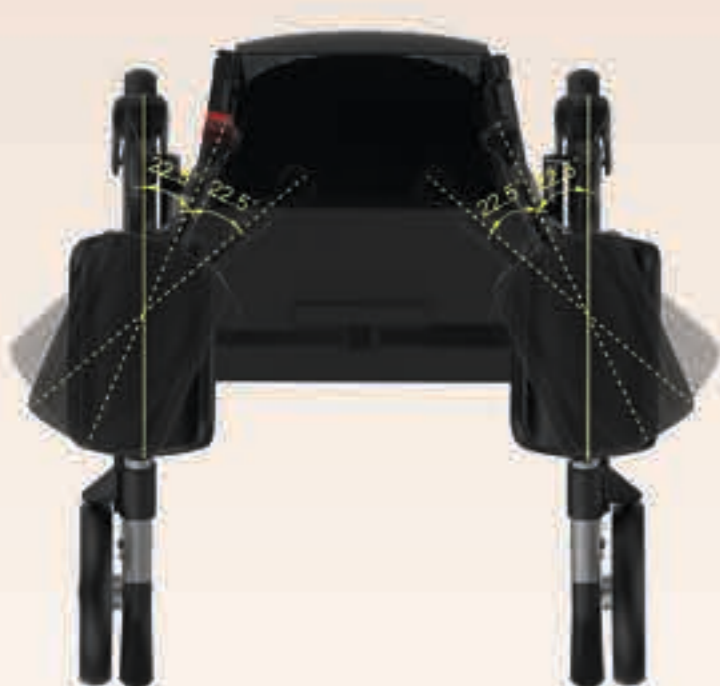

Mobilex arthritis rollatoren Tiger Outdoor er baseret på den elegante rollator Lion, med tilsvarende egenskaber og funktioner. Derudover er de bløde og behagelige underarmsstøtter med deres bremsehåndtag justerbare i dybde, vinkel og højde. Underarmsstøtterne er indstillelige i to vinkler på hhv. 22,5° og 45°. Rollatoren er ekstremt stabil og let at manøvrere. Den har en letvægts aluminiumsramme, som let kan foldes sammen for opbevaring og transport. Rollatoren har store, letløbende hjul og glatte, låsbare bremses. I kørestilling er den sikret mod uønsket foldning. En robust konstruktion af ramme og håndtag sikrer en optimal brugervenlighed. Rollatoren Tiger Outdoor er godkendt til udendørs brug og en brugervægt på 200 kg.

