

ROLLATOREN

MOBILEX AUSWAHL AN ROLLATOREN

INHALTSVERZEICHNIS

LEOPARD Rollator.....	3
GEPARD Rollator.....	4
BUFFALO HD Rollator.....	4
ROLLOGUARD.....	5
PANDA COMFORT Rollator.....	5
TIGER & TIGER OUTDOOR Rollator.....	6
LION Rollator.....	7
PANTHER Rollator.....	7
PUMA AIR Rollator.....	8
JAGUAR Rollator.....	9
IMPALA Rollator.....	9
ZUBEHÖR.....	10
BISON Gehtrainer.....	11
DYNAWALK Gehtrainer.....	11

Allgemeine Beschreibung

Mobilex hat's bedienerfreundlich, qualitativ hochwertig, stabil, leicht und bunt. Die passenden Rollatoren für jede Situation - was immer Sie suchen, Sie werden es finden. Unser umfangreiches Sortiment an Rollatoren bietet für jeden Geschmack und für jede Anwendung das passende Modell.

Auch wenn unsere Modelle stets die Namen schneller Tiere tragen, so sind es doch Sie selbst, die das Tempo der Fortbewegung bestimmen, genauso wie Form und Farbe. So sind alle Mobilex-Rollatoren selbstverständlich mit gut haftenden und leicht bedienbaren Bremsen zu Ihrer Sicherheit ausgestattet. Eine leichte und sehr stabile Rahmenkonstruktion sorgt zudem für die nötige Stabilität beim Fahren oder beim Sitzen, wenn Sie sich mal eine kleine Pause gönnen möchten. Mobilex-Rollatoren gibt es auch bis zu einer Gewichtsbelastung von bis zu 200 kg und Sitzbreiten bis zu 56 cm. Mit einer maximalen Auszugslänge der Schiebestangen bis zu 112 cm finden auch die Größten unter Ihnen sicher das passende Modell. Ob Indoor oder eine Outdoornutzung über Stock und Stein decken wir für Sie jeden Einsatzbereich ab. Auch für Patienten mit Arthritis haben wir zwei moderne und formschöne Modelle im Repertoire. Tauchen Sie auf den nächsten Seiten ein in die vielfältige Welt der Mobilex-Rollatoren und deren umfangreiches Zubehör. Sollte ein passendes Modell wider Erwarten nicht dabei sein, so sprechen Sie uns bitte an.

Weitere Informationen?

Auf diesen Seiten finden Sie eine Auswahl unserer umfangreichen Produktpalette. Wenn Sie sich für unser gesamtes Sortiment interessieren, laden wir Sie ein, unsere Website www.mobilex.dk zu besuchen, wo Sie alle Produkte ansehen und unseren Katalog herunterladen können. Der QR-Code führt Sie direkt zu unserer Website.



LEOPARD ROLLATOR



Der Mobilex-Rollator **Leopard** hat einen Aluminiumrahmen, der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfallen lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Er hat große, leichtlaufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Der Rollator Leopard wird standardmäßig mit Einkaufstasche, Rückengurt und Stockhalter geliefert. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen und ist optional auch mit Softrädern lieferbar.



LEOPARD MIT SOFTRÄDERN

Rollator Leopard HMV Nr: 10.50.04.1212	Standard	Standard+Softräder	Small	X-Small	Small+Softräder
	312301 (rot) 312304 (anthrazit) 312309 (blau) 312300 (grün) 312303 (platin)	312308 (rot) 312306 (anthrazit) 312314 (blau) 312313 (grün) 31230A (platin)	312302 (anthrazit) 312319 (rot)	31230K (anthrazit)	312318 (anthrazit) 31230E (rot)
Schiebestangen höhenverstellbar	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	63 - 79 cm	66 - 86 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	130 - 165 cm	135 - 170 cm
Sitzhöhe	62 cm	62 cm	55 cm	50 cm	55 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Länge (Tiefe)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Gewicht (+ Tasche 380 g)	7,4 kg	7,6 kg	7,1 kg	6,9 kg	7,3 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion				
Radgrößen	Vorne und hinten: 200 x 35 mm				

GEPARD ROLLATOR

Der Mobilex-Rollator **Gepard** hat einen Rahmen aus Carbon mit weiteren Teilen aus Aluminium. Insgesamt ist die Struktur sehr leicht, bietet aber eine hohe Stabilität gekoppelt mit einer extremen Leichtgängigkeit. Die Ausstattung entspricht dem Rollator Leopard. Der Rollator Gepard ist für ein Benutzergewicht bis 150 kg bzw. die Version HD ist für ein Benutzergewicht bis 200 kg getestet und zugelassen. Beide Versionen sind optional auch mit Softrädern lieferbar.



Rollator Gepard HMV 10.50.04.1245 * HMV 10.50.04.2018	Standard 312401 (schwarz) 312403 (gelb) 312404 (lila/schwarz)	Mit SOFT Rädern 312406 (schwarz) 312407 (gelb) 312408 (lila/schwarz)	Small 312402 (schwarz)	HD * 312405 (schwarz)
Schiebestangen höhenverstellbar	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	150 - 200 cm
Sitzhöhe	62 cm	62 cm	55 cm	62 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	46 cm	46 cm	46 cm	56 cm
Länge (Tiefe)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Gewicht (+ Tasche 380 g)	5,4 kg	5,5 kg	5,1 kg	5,7 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion			
Radgrößen	vorne und hinten: 200 x 35 mm			

BUFFALO HD ROLLATOR

Der Mobilex-Rollator **Buffalo HD** hat einen grauen Aluminiumrahmen der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfallen lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Seine Struktur wurde mit zusätzlichen Elementen verstärkt, um eine höhere Last zu tragen. Die maximale Tragfähigkeit erreicht daher 200 kg. Er hat große, leichtlaufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Die optimale und steife Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist die Grundlagen für einen bestmöglichen Bedienkomfort. Standardmäßig verfügt der Rollator über eine Transportsicherung, eine abnehmbare Einkaufstasche, einen Rückengurt sowie einen Stockhalter. Darüber hinaus ist eine große Auswahl an Zubehör verfügbar. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis 200 kg getestet und zugelassen.



Buffalo HD Rollator HMV Nr. 10.50.04.2012	Standard Art. Nr. 312305	Small Art. Nr. 312307	Standard mit SOFT Rädern Art. Nr. 312385	Small mit SOFT Rädern Art. Nr. 312387
Schiebestangen höhenverstellbar	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	150 - 200 cm	125 - 170 cm	150 - 200 cm	125 - 170 cm
Sitzhöhe	62 cm	55 cm	62 cm	55 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Länge (Tiefe)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Gewicht (+ Tasche 380 g)	7,8 kg	7,5 kg	7,9 kg	7,6 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion			
Radgrößen	Vorne und hinten: 200 x 35 mm			

ROLLOGUARD

Die innovativen und sturzpräventiven Bremssysteme von RolloGuard sind mit unseren hochwertigen Mobilex-Rollatoren eine perfekte Kombination. RolloGuards Sturzprävention für Rollatoren reduziert das Risiko von Stürzen oder Sturzverletzungen mit einem Rollator. Mit der patentierten Sturzpräventionstechnologie werden versehentliche Bewegungen verhindert und so eine sicherere Mobilität ermöglicht. **RolloGuards Instant Fall Prevention ist mit der Buffalo, Gepard, Leopard und Tiger Rollator-Produktlinie kompatibel.** Die RolloGuard Sturzprävention verwendet die "Transversor"-Technologie, die vor unbeabsichtigten Bewegungen schützt und die Mobilität sicherer macht - for a better and safer life in motion.

Einstellbares Schutzlevel

Ein mit RolloGuard ausgestatteter Rollator wird mit einem Aufkleber auf der Bremstrommel gekennzeichnet. Dieser Aufkleber ist mit einer bestimmten Farbe, Beschreibung und Verwendungszweck versehen. Unterschieden wird zwischen den drei Sturzschutzleveln; Hoch (rot), Mittel (gelb) und Niedrig (grün), die alle unterschiedliche Sensibilitäten haben, was sich auf die Aktivierung der Fall Protection auswirkt.



PANDA COMFORT ROLLATOR

Der Leichtgewichtrollator **Panda Comfort** hat einen Aluminiumrahmen in dunkelblau. Der Rollator lässt sich leicht zusammenklappen und nimmt im zusammengeklappten Zustand nur wenig Platz ein und ist leicht zu transportieren. An der Vorderseite ist eine geschlossene Einkaufstasche angebracht, die mit zwei Griffen versehen ist, so dass sie leicht abgenommen und separat getragen werden kann. Durch die großen, weichen Räder ist der Rollator sehr stabil und leicht zu manövrieren. Er ist für den Einsatz im sowohl Innen- als auch Außenbereich geeignet und die großen Räder sorgen für eine gute Stoßdämpfung. Die Schiebegriffe lassen sich sehr einfach und ohne Werkzeug in der Höhe verstellen. Die Bremsen sind leichtgängig und feststellbar. Am Rahmen nahe der Hinterräder sind zwei Kipp-Pedalen angebracht, um das Überwinden von kleineren Hindernissen zu erleichtern. Standardmäßig verfügt der Rollator über eine Transportsicherung, eine abnehmbare, geschlossene Einkaufstasche, einen Rückengurt und einen Stockhalter. Eine große Auswahl an weiterem Zubehör ist verfügbar. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht von bis zu 150 kg getestet und zugelassen.



Panda Comfort Rollator	312601
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	77,5 - 99,1 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	160 - 200 cm
<i>Sitzhöhe</i>	59 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	65 cm / 26,4 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	45,5 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	77,5 cm
<i>Gewicht</i>	9,44 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 285 mm x 45 mm

TIGER / TIGER OUTDOOR ROLLATOR

Die Mobilex Arthritis Rollatoren **Tiger** und **Tiger Outdoor** basieren auf den eleganten Rollatoren Leopard (Tiger) bzw. Lion (Tiger Outdoor) und verfügen daher auch über deren Eigenschaften und Funktionen. Zusätzlich sind die weichen und bequemen Unterarmstützen mit ihren Bremsgriffen in Tiefe, Winkel und Höhe einstellbar. Außer beim Modell 312201 und 312211 sind die Armauflagen zusätzlich nach innen in zwei Stufen um jeweils 22,5 Grad drehbar. Die Rollatoren sind ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Die haben große, leichtlaufende Räder und verfügen über leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahrstellung sind die Rollatoren gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Standardmäßig verfügen die Rollatoren über eine Transportsicherung und eine abnehmbare Einkaufstasche. Der Rollator Tiger Standard ist nur für den Innenbereich auf ebenen Böden und für ein Benutzergewicht bis 150 kg zugelassen. Das Modell Tiger Outdoor ist auch für den Außenbereich und ein Benutzergewicht bis 200 kg zugelassen.

Arthritis Rollator Tiger HMV Nr. 10.46.04.0016 * HMV Nr. 10.46.04.0020	Standard Art.Nr. 312201 (anthrazitgrau) Art.Nr. 312211 (rot)	Mit drehbaren Armauflagen * Art.Nr. 312202 (metallic braun)
Schiebestangen höhenverstellbar	90 cm - 115 cm	90 cm - 115 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	150 - 200 cm	150 - 200 cm
Sitzhöhe	62 cm	62 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	62 / 22,5 cm	62 / 22,5 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	46 cm	46 cm
Länge (Tiefe)	66 cm	66 cm
Gewicht (+ Tasche 380 g)	9,5 kg	9,5 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion	2 feststellbar mit Parkfunktion
Radgrößen (vorne und hinten)	200 x 35 mm	200 x 35 mm



Arthritis Rollator Tiger Outdoor HMV Nr. 10.50.04.3002	Anthrazitgrau Art.Nr. 312205	Braun metallic Art.Nr. 312206
Armauflagen höhenverstellbar	87 - 110 cm	87 - 110 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	140 - 185 cm	140 - 185 cm
Sitzhöhe	62 cm	62 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	71 cm / 31 cm	71 cm / 31 cm
Sitzbreite / Innere Breite zwischen den Handgriffen	56 cm / 46 cm	56 cm / 46 cm
Länge (Tiefe)	77 cm	77 cm
Gewicht (+ Tasche 380 g)	12 kg	12 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion	
Radgrößen	Vorne 285 x 44 mm - hinten 235 x 44 mm	

LION ROLLATOR

Der Mobilex-Rollator **Lion** ist ein für abseits asphaltierter und gepflasterter Wege entwickelter Rollator, der mit seinen großen Rädern auch vor Hindernissen nicht zurückschreckt bei denen Sie mit anderen Rollatoren nur schwerlich weiterkommen würden. Die großen und weichen Räder gewährleisten eine bequeme Fahrt auch über holpriges Kopfsteinpflaster und nicht ganz ebene Kies- oder Feldwege. Der Rollator lässt sich für einen geringen Platzbedarf leicht in Querrichtung zusammenfallen und ist daher sehr leicht im Auto zu transportieren oder zu Hause abzustellen. Er verfügt serienmäßig über eine reißfeste bequeme textile Sitzfläche, eine abnehmbare Einkaufstasche, einen Stockhalter und einen Rückengurt. Der Rollator ist in zwei Farben (braun oder anthrazitgrau) lieferbar und für ein Benutzergewicht bis 200 kg getestet und zugelassen.



Mobilex Rollator Lion HMV Nr: 10.50.04.2015	Standard Art.Nr. 312372 (anthrazitgrau) Art.Nr. 312374 (braun metall.)	Small Art.Nr. 312371 (anthrazitgrau) Art.Nr. 312373 (braun metall.)
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	90-112 cm	77-90 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	170 - 220 cm	165 - 175 cm
<i>Sitzhöhe</i>	62 cm	53 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	68 / 26 cm	68 / 26 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	56 cm	56 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	76 cm	76 cm
<i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i>	9,3 kg	9,0 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion	
<i>Radgrößen (Softräder)</i>	Vorne 285 x 44 mm - hinten 235 x 44 mm	

PANTHER ROLLATOR

Der Mobilex Leichtgewichtsrollator **Panther** hat einen blauen Aluminiumrahmen, der sich leicht seitwärts zusammenklappen lässt, sodass er leicht zu transportieren ist. Der Sitz ist aus strapazierfähigem, langlebigem Material gefertigt, das dem Benutzer Komfort und Stabilität bietet. An der Vorderseite befindet sich eine abnehmbare und mit zwei Griffen versehene Tasche. Durch die großen, weichen Räder ist der Rollator sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich gut geeignet. Die Schiebegriffe können ohne Werkzeug in der Höhe verstellt werden. Der Rollator ist mit zwei feststellbaren Bremsen ausgestattet, die an den Hinterrädern bremsen. Am Rahmen ist ein Ankipprad integriert, um das Überwinden von kleineren Hindernissen zu erleichtern. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis zu 150 kg getestet und zugelassen und ist in zwei Größen, Standard und Small, lieferbar.



Eine neue champagnerfarbende Version des Rollators wird 2024 anstatt des blauen Modells erhältlich sein.

Panther Rollator	Standard 3180U1	Small 3180U2
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	78 - 101 cm	71 - 93 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	150 - 195 cm	140 - 187 cm
<i>Sitzhöhe</i>	62 cm	55 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	62 / 22 cm	62 / 22 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	43 cm	43 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	75,5 cm	75,5 cm
<i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i>	6,73 kg	6,25 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion	
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 200 x 35 mm	

PUMA AIR ROLLATOR

Der **Puma Air** Rollator ist ein neu entwickelter Outdoor-Rollator in hoher Qualität. Der Rollator hat einen Aluminiumrahmen in mattschwarz oder rot, sowie extra große 12" (295 mm) Luftreifen, die für mehr Stabilität auf schwierigem Untergrund sorgen. Die Schiebegriffe können einfach und ohne Werkzeug in der Höhe verstellt werden. Darüber hinaus kann der Rollator sehr leicht mit einem Handgriff gefaltet werden, indem die Schlaufe am Sitz nach oben gezogen wird. Standardmäßig verfügt der Puma Air Rollator über einen Rückengurt, einen Getränkehalter, einen Stockhalter und eine moderne, geschlossene Tasche. Mit seinen großen Luftreifen eignet er sich besonders für den Außenbereich, aber auch für den Innenbereich, da er nur 65 cm breit ist. Insgesamt wiegt der Rollator 9,78 kg und ist leicht zu transportieren. Er ist für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen.



Puma Air Rollator	312501+02
Schiebestangen höhenverstellbar	82 - 99 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	160 - 200 cm
Sitzhöhe	59 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	65 cm / 26 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	40 cm
Länge (Tiefe)	76,4 cm
Gewicht	9,78 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion
Radgrößen	Vorne und hinten: 295 mm (12") x 45 mm



312560

Zubehör:
 Tablett, das einfach am Rollator befestigt wird (statt des Rückengurts).



JAGUAR ROLLATOR



Der Mobilex-Rollator **Jaguar** hat einen Rahmen aus Aluminium und kann leicht zusammengeklappt werden. Der Rollator ist **nur** für die Nutzung im Innenbereich zugelassen und ist für eine Belastung bis 100 kg getestet. Der Jaguar SUPREME hat ein besonders wertiges Design mit Teilen in Holzoptik und mit neuen silberfarbenen Rädern. Auch das Tablett des Rollators ist in der Holzoptik gehalten.



312414



312416



312417

Rollator Jaguar	Verschiedenfarbig	SUPREME
Schiebestangenhöhe	83,5 - 94,5 cm	90,3 - 96 cm
Faltmaße (H x B x T)	83,5 x 54,5 x 27 cm	90,3 x 56,5 x 27 cm
Gesamtbreite	54,5 cm	56,5 cm
Länge offen / geschlossen	66 cm / 27 cm	66 cm / 27 cm
Gewicht	6,3 kg	6,0 kg
Tragkraft (Rollator / Tasche)	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion	
Radgrößen	Vorne und hinten: 7" (175 x 27 mm)	

IMPALA ROLLATOR

Der Mobilex Leichtgewichtsrollator **Impala** hat einen blau-metallicfarbenen Aluminiumrahmen. Das Faltsystem ermöglicht ein Zusammenklappen und reduziert den Platzbedarf im gefalteten Zustand auf ein Minimum. Der Rollator ist mit Stockhalter, sowie gepolsterter Rückenlehne und einer praktischen Tasche unter dem Sitz ausgestattet. Leicht zum Auf- und Zuklappen ist der Rollator mit seinen großen 200 mm Rädern für eine Verwendung sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen geeignet. Die anatomisch geformten Schiebegriffe lassen sich in der Höhe an den Benutzer anpassen und ermöglichen ein bequemes und sicheres Vorankommen. Der Rollator ist mit zwei feststellbaren Bremsen an den Hinterrädern ausgestattet.




Impala Rollator HMV Nr: 10.50.04.1187	Standard 312060	Hoch 312061	Breit 312062
Schiebestangen höhenverstellbar	79 - 93 cm	90 - 105 cm	79 - 93 cm
Sitzhöhe	53 cm	63 cm	53 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	60 / 27 cm	63 / 35 cm	66 / 27 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	48 cm	49 cm	53 cm
Länge (Tiefe)	70 cm	75 cm	70 cm
Gewicht	7,4 kg	7,9 kg	7,5 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion		
Radgrößen	Vorne und hinten: 200 x 35 mm		

ZUBEHÖR

Eine kleine Auswahl an Zubehör erhältlich für unsere Mobilex-Rollatoren. Die gesamte Auswahl ist im Katalog oder auf www.mobilex.dk zu finden.




Regenschirm

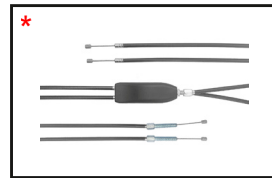

Einhandbremse



Sauerstoffhalter

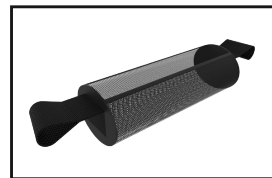

Netztasche



Klingel



LED-Lampen



Hoher Rückengurt



Tablett



Fester Sitz



Schließbare Tasche



Schleifbremse

* Nur für die Rollatoren Buffalo, Gepard, Leopard, Lion und Tiger

BISON GEHTRAINER

Der Mobilex **Bison** Gehtrainer ist eine Mobilitätshilfe zur Erlernung bzw. zum Training des aktiven Gehens und kann zur Unterstützung bei Gleichgewichtsstörungen dienen. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und bietet mehrere Verstellfunktionen: die Armauflagen sind durch die Gasfederunterstützung sehr einfach in der Höhe zu verstellen. Die Handgriffe mit den Bremshebeln sind winkelverstellbar. Alle diese Einstellungen können ohne Werkzeug durchgeführt werden. Die handbetätigten Bremsen wirken auf die Hinterräder und alle vier Räder sind mit Feststellbremsen ausgestattet. Die geringe Breite ermöglicht auch enge Passagen. Ein Gurtsystem zur Gehunterstützung ist als Zubehör verfügbar.



Bison Gehtrainer HMV Nr. 10.46.02.1022	313300
<i>Breite des Rahmens an den hinteren Rädern</i>	66,0 cm
<i>Breite der Armauflagen min. - max.</i>	66,0 - 80,0 cm
<i>Abstand zwischen den Handgriffen</i>	34,0 cm
<i>Höhe min. - max.</i>	102,2 - 143,0 cm
<i>Länge</i>	86,0 cm
<i>Gewicht</i>	18,3 kg
<i>Tragkraft</i>	150 kg

DYNAWALK GEHTRAINER

Der Mobilex **DynaWalk** Gehtrainer ist eine Mobilitätshilfe zur Erlernung bzw. zum Training des aktiven Gehens und kann zur Unterstützung bei Gleichgewichtsstörungen dienen. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und bietet mehrere Verstellfunktionen: die Armauflagen sind in der Höhe einstellbar, die Handgriffe sind winkelverstellbar. Die Breite kann durch das Kreuzgelenk leicht angepasst werden. Alle diese Einstellungen können ohne Werkzeug durchgeführt werden.




DynaWalk Gehtrainer HMV Nr. 10.46.02.1016	Standard Art. Nr. 313001	Brake Art. Nr. 313002
<i>Belastbarkeit</i>	135 kg	135 kg
<i>Gewicht</i>	12,5 kg	12,5 kg
<i>Länge</i>	82 cm	82 cm
<i>Breite (einstellbar)</i>	67,5 - 75 cm	67,5 - 75 cm
<i>Höhe Armauflagen (einstellbar)</i>	100 - 123 cm	100 - 123 cm
<i>Max. Höhe der Handgriffe</i>	136 cm	136 cm
<i>Bremsen vorne</i>	2 x feststellbar mit Fußpedal	2 x feststellbar mit Fußpedal
<i>Bremsen hinten</i>	2 x feststellbar mit Fußpedal und Geschwindigkeitsreduktionsbremse	2 x feststellbare Bremsen mit Betätigung am Handgriff



MODERNE HILFSMITTEL ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

Wir bieten eine große Auswahl an Hilfsmitteln und Ersatzteilen für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen an. Alle unsere Mobilex-Produkte sind von bester Qualität und erfüllen die besonderen Bedürfnisse der Benutzer.

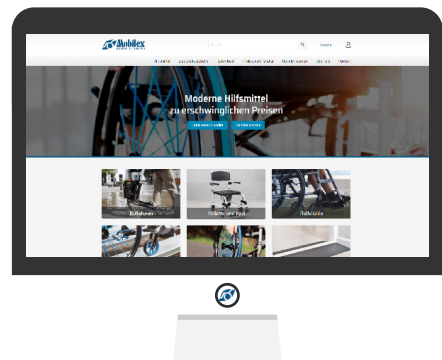

Besuchen Sie uns auf www.mobilex.dk



Tel. +45 8793 2220
Fax +45 8793 1777
www.mobilex.dk

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg